

Masque de beauté

OVE

Guide d'utilisation



lucibel·le

PARIS

une marque du groupe Lucibel

Chère cliente, cher client,

Vous venez d'acquérir le masque de beauté Ove et nous vous en remercions. Vous trouverez dans ce guide les indications pour profiter pleinement des fonctionnalités offertes par cet appareil.

Avec le masque de beauté Ove, découvrez les bienfaits de la lumière rouge grâce à des séances beauté relaxantes.

Lucibel·le Paris, filiale du groupe Lucibel pionnière sur la photobiomodulation par la lumière LED, place une nouvelle fois les bienfaits de la lumière au cœur d'un concept innovant avec le masque de beauté Ove, un nouveau masque de beauté qui utilise la technologie LED. Fruit d'une collaboration inédite avec le **designer Olivier Lapidus**, le masque de beauté Ove permet de sublimer le capital beauté selon le principe de la photobiomodulation LED, technologie innovante à l'efficacité prouvée.

Le corps est composé de cellules vivantes qui absorbent et renvoient de la lumière en permanence. L'exposition à la lumière est donc une nécessité pour tout être vivant et constitue une vraie ressource pour contribuer à notre équilibre.

La photobiomodulation LED, technologie utilisée par le masque de beauté Ove, désigne une technique utilisant une lumière froide, sans aucun risque de brûlure, pour stimuler et régénérer les cellules.

Lucibel·le Paris : La beauté et le bien-être par la lumière

SOMMAIRE


Utilisation.....	p. 3
Spécifications	p. 5
Support technique.....	p. 6
Consignes de sécurité	p. 7
Garantie légale.....	p. 8

LE COFFRET CONTIENT

- 1 masque de beauté Ove
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 guide d'utilisation

MISE EN ROUTE


- Poser le masque de beauté Ove sur un support plat et stable
 - Eviter tout branchement du masque de beauté Ove sur un boîtier multiprise
 - Brancher le masque de beauté Ove sur une prise secteur
 - Les yeux doivent être protégés au moyen des lunettes de protection fournies
 - Ajuster la position du masque avec la tige flexible
 - Pour la mise en route, procéder à un appui court sur le bouton du socle
- ① Approcher le visage à l'intérieur du masque jusqu'à ce que le nez touche la paroi.
 - ② Régler la hauteur et la position à l'aide de la tige flexible du masque de beauté Ove.
 - ③ Procéder à un appui court sur le bouton pour la mise en route de le masque de beauté Ove.

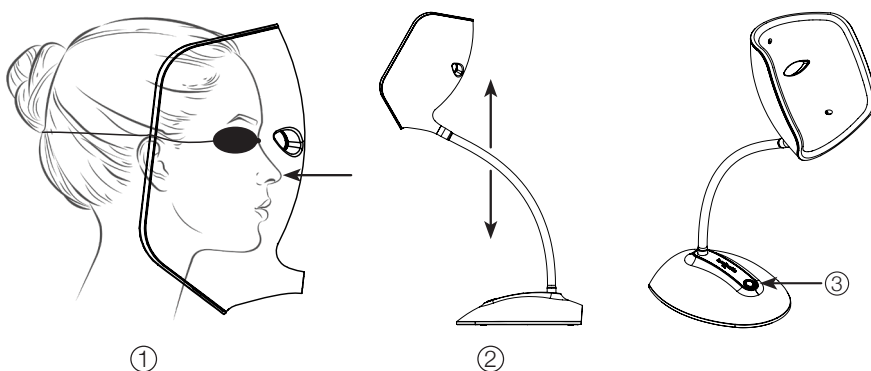


- La durée de la séance est programmée sur une durée de 12 minutes alternant flash et lumière continue. A la fin de la séance, Ove s'éteint automatiquement.
- Pour éteindre le masque de beauté Ove pendant la séance, procéder à un appui long (3 secondes).
- Après utilisation, débrancher le masque de beauté Ove du secteur

PROTOCOLE D'UTILISATION

Le masque de beauté Ove bénéficie des dernières innovations techniques de Lucibel·le avec des LED d'intensité lumineuse spécifique, adaptées aux différentes zones du visage.

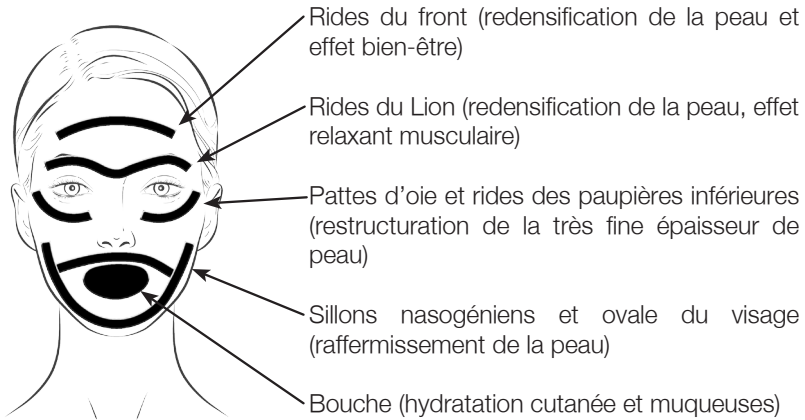

- Ove convient à tous types de peau, tous phototypes, sans effets secondaires.
- Il est recommandé de bien nettoyer sa peau avant usage afin d'optimiser l'absorption de la lumière et de n'associer que les produits conseillés (une sensibilité individuelle pour certains produits cosmétiques n'est pas exclue comme dans toute procédure), évitez d'appliquer tout autre produit avant la séance.
- Les séances doivent être espacées de 72h (exemple 1 séance le mardi puis 1 séance le samedi). Ce délai correspond au temps de « digestion » de l'énergie lumineuse absorbée par les cellules.
- Les effets sont optimaux après un nombre moyen de 24 séances (effets et durée pouvant varier selon les utilisateurs), reprise des séances après une pause de 1 à 2 mois afin de prendre en compte l'effet retard.
- Pour bien évaluer l'évolution des résultats, prendre une photo avant de commencer le protocole, une 2^{ème} photo après 12 séances et une 3^{ème} après 24 séances.
- Après 3 utilisations consécutives, laisser refroidir le masque de beauté Ove pendant 5 mn avant la prochaine mise en route.
- **Contre-indiqué pour les personnes souffrants ou susceptibles de souffrir de crises d'épilepsie (en cas de doute, consultez votre médecin).**

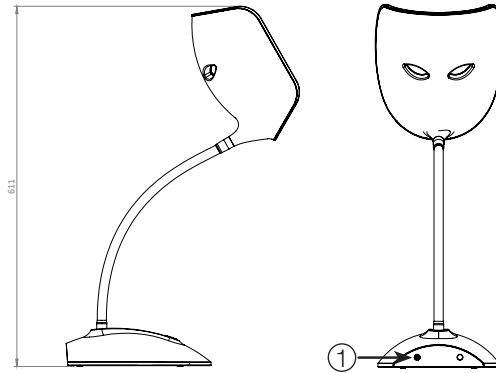

- ① Entrée jack réservée aux accessoires Lucibel·le Paris. Aucun autre appareil auxiliaire ne doit être branché dessus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	+10°C à +35°C
Durée de vie maximale	50 000h
Matériaux	Habillage : PC, ABS / Flexible : PVC, Laiton / Base : Acier / Visserie : Acier zingué / Dissipateur : Aluminium
Poids	3,30 Kg
Dimensions	l 213mm x L 396mm X Ht 611mm
Nombre de LED	40
Caractéristiques électriques d'entrée et de sortie	230V ~ 50/60Hz
Longueur d'onde	635nm
Consommation	40W

UN PROBLÈME : QUE FAIRE ?

Si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation du masque de beauté Ove, veuillez vérifier au préalable que vous avez respecté les instructions décrites dans ce guide. Avant de nous contacter, veuillez vérifier que :

- Le masque de beauté Ove est raccordé au secteur
- Le bouton de mise en route a été actionné

Une fois ces éléments vérifiés, et si le dysfonctionnement persiste, contactez-nous : contact@lucibelle.fr

Pour des raisons de sécurité, il ne faut en aucun cas démonter le masque de beauté Ove. En cas d'ouverture de l'appareil, le bénéfice de la garantie ne pourra s'appliquer.

CONTACT PERSONNALISÉ

*Vous avez acheté le masque de beauté Ove directement via le site Internet ?
Vous n'êtes actuellement pas en lien avec l'un de nos lumino-dermaticiens ?*

Pour un contact plus personnalisé et afin de suivre vos résultats, nous vous proposons d'entrer en relation avec l'un de nos professionnels qui saura vous conseiller au mieux.

Lucibel-le Paris, c'est également une équipe de professionnels de la beauté pour vous conseiller et vous faire tester nos produits.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Avant toute utilisation du masque de beauté Ove, nous vous conseillons de prendre connaissance des instructions présentées dans cette rubrique.

- Utiliser le masque de beauté Ove uniquement tel que décrit dans ce guide. Le non-respect des consignes et des recommandations d'utilisation risque de ne pas vous apporter les résultats souhaités.
- Utiliser uniquement les accessoires fournis par Lucibel.le Paris.
- Ne pas utiliser le masque de beauté Ove plus longtemps que le temps recommandé.
- Utiliser des lingettes imprégnées d'une solution bactéricide et virucide, ne pas utiliser de détergent, de solvant, produit chimique ou éponge abrasive pour nettoyer le masque de beauté Ove.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- Vérifier que la tension du réseau est conforme à la plage indiquée sur l'alimentation de le masque de beauté Ove (100-240 VAC). Il doit être relié à une prise murale aux normes électriques en vigueur.
- Ne pas utiliser le masque de beauté Ove en prenant un bain ou une douche. Ne pas passer le masque de beauté Ove sous l'eau. Ne pas poser le masque sur une surface humide ou à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'un évier. Utiliser le masque de beauté Ove dans un endroit sec et éviter toute projection d'eau.
- Si le masque de beauté Ove tombe dans l'eau : ne pas le toucher et débrancher immédiatement l'alimentation.

RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Ne pas utiliser le masque de beauté Ove sous une couverture ou similaire. Une chaleur excessive pourrait se dégager et provoquer un incendie, un choc électrique, ou blesser une personne.
- Ne jamais utiliser le masque de beauté Ove avec un câble ou une alimentation endommagés.
- Porter ou déplacer le masque de beauté Ove uniquement en manipulant le pied. Ne pas secouer ou faire tomber le masque de beauté Ove.
- Ne pas laisser le masque de beauté Ove sans surveillance lorsqu'il est allumé et branché.
- Ne pas ouvrir ou démonter le masque de beauté Ove.

La Société garantit la conformité des Produits Lucibel.le Paris aux spécifications de la Société et à l'état des normes techniques françaises et européennes applicables au jour de l'achat.

Tous les Produits en vente bénéficient de la garantie légale de conformité (articles L.217-4 et suivants du Code de la Consommation) et de la garantie contre les vices cachés (articles 1641 à 1648 du Code civil), permettant au Client de renvoyer les Produits livrés défectueux ou non conformes.

Conformément à l'article L. 217-5 du Code de la consommation, pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par la Société et posséder les qualités que celui-ci a présenté au consommateur ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par la Société, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; ou
2. Présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance de la société et que ce dernier a accepté.

Lorsqu'il agit dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur :

- bénéficie d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du bien pour agir vis-à-vis du Vendeur ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coûts prévus par l'article L. 217-9 du Code de la consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du bien, sauf pour les biens d'occasion ou « reconditionnés », où ce délai est fixé à six (6) mois.

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.

La mise en œuvre de la garantie a lieu sans frais pour le client.

Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, le consommateur a le choix entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil. L'action résultant des vices cachés doit être intentée par le client dans un délai de deux (2) ans à compter de la découverte du vice.

Tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de conception, de matière ou de fabrication donne droit à l'échange ou la réparation du Produit, après examen du Produit reconnu défectueux par la Société. Cette garantie

ne s'applique qu'au bénéfice direct du Client.

La garantie ne couvre pas les défauts dont il est établi qu'ils proviendraient du non-respect des prescriptions d'utilisation ou d'entretien indiquées par la Société et qui figurent dans le guide d'utilisation. De même, la garantie ne couvre pas les défauts dont il est établi qu'ils proviendraient d'une négligence, d'une cause étrangère au Produit telle qu'une mauvaise installation électrique, un défaut d'entretien, un défaut de surveillance, un incendie, un dégât des eaux, des pénétrations de sable ou de liquide, un rangement inapproprié, une utilisation anormale, une utilisation en milieu humide ou extérieur, une chute.

La garantie ne s'applique pas non plus en cas d'usage de pièces ou accessoires non fabriqués par la Société, en cas d'altération ou de retrait du numéro du lot apposé en usine, en cas d'assemblage, de désassemblage, d'intervention ou modification effectués par un tiers non agréé par la Société. Pour bénéficier de la garantie, le Client devra aviser la Société à l'adresse contact@lucibelle.fr ou par courrier à l'adresse du Service retour produit : Lucibel - service SAV - 101 Allée des Vergers, 76360 Barentin, des défauts imputés au Produit dès la manifestation de ceux-ci, et, au plus tard, dans un délai d'un mois après réception du Produit (la date de livraison faisant foi), en fournissant :

- un descriptif détaillé du ou des défauts imputés
- le numéro de lot du Produit et les conditions d'emploi de celui-ci.
- un justificatif d'achat

Dès accusé réception par la Société, le Client devra expédier le produit dans les quinze jours suivant la réception de la notification par mail ou courrier, à l'adresse du Service retour le Produit complet, dans son emballage d'origine, et s'abstenir d'effectuer lui-même une réparation. Un retour non autorisé pourra être refusé par la Société. Les frais de retour sont à la charge du Client.

En cas de défaut reconnu par la Société au titre de la présente garantie, la Société procédera, à son choix, au remplacement du ou des Produits reconnus défectueux ou à l'échange du matériel ou des pièces reconnus défectueux, et ce par des Produits aux performances au moins équivalentes. Dans ce cas, les frais inhérents au retour du produit et de son renvoi seront pris en charge par la société à hauteur de 40€ TTC. Toute autre responsabilité ou compensation est exclue. En cas de remplacement de Produits au titre de la présente garantie, les Produits remplacés sont eux-mêmes garantis mais uniquement pour la durée restant à courir de la garantie initiale.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits, ou consécutifs (manque à gagner y compris) occasionnés du fait d'une utilisation du produit non conforme au présent guide d'utilisation ou à des fins autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu.

Vous souhaitez nous contacter ?
contact@lucibelle.fr
+33 (0)1 80 04 12 35

